NeuroPace, Inc.
455 N. Bernardo Ave.
Mountain View, CA 94043
Atención al cliente
866-726-3876
www.NeuroPace.com

℞ Only


Materiales para pacientes de NeuroPace®

NEUROPACE

RNS® SYSTEM

Guía de referencia rápida

Monitor remoto modelo 5106

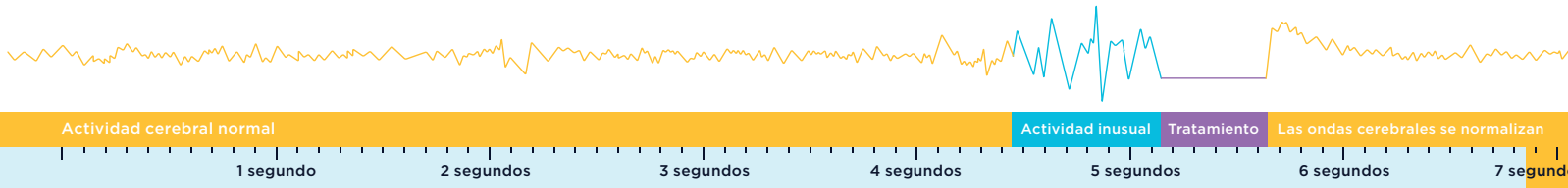

Antes de utilizar el monitor remoto, asegúrese de leer todo el Manual del monitor remoto NeuroPace® para conocer las instrucciones, advertencias y precauciones relacionadas. Las imágenes de este documento son representativas, y algunos detalles pueden ser diferentes a la experiencia de un usuario concreto.


PARTES DEL MONITOR REMOTO NEUROPACE®

La tableta del monitor remoto viene con su cable de alimentación (adaptador de CA) y un transductor.

Tableta del monitor remoto



Cable de alimentación (adaptador de CA) (1 o 2 piezas)

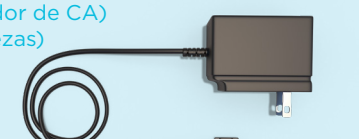

Transductor




CONFIGURAR EL MONITOR REMOTO

1 Busque una zona:
- ubicada cerca de un tomacorriente adecuado para el enchufe del cable de alimentación suministrado con el monitor remoto;
- dentro del alcance de su red Wi-Fi;
- fuera del alcance de niños pequeños y animales domésticos, que podrían dañar el transductor y el monitor remoto;
- lejos de grandes aparatos eléctricos;
- libre de agua, humedad o condensación, y sin temperaturas inferiores a 32 °F ni superiores a 95 °F.

2 Si su cable de alimentación viene en dos piezas separadas, conecte las dos piezas antes de enchufar el aparato al tomacorriente. Enchufe un extremo del cable de alimentación al monitor remoto y el otro extremo al tomacorriente.

3 Localice el puerto USB de la tableta de su monitor remoto. Enchufe el cable del transductor en el puerto USB.

Es posible que la tableta que reciba no sea el mismo modelo que se muestra aquí. La ubicación de los botones y las conexiones también puede ser diferente.

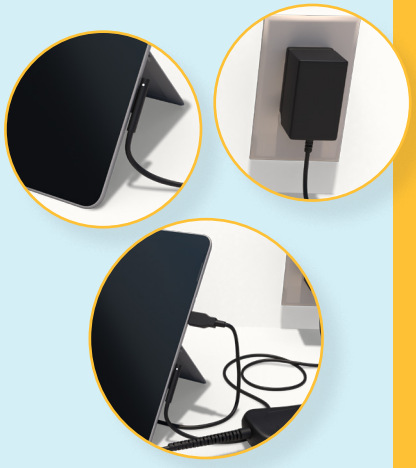

© 2026 NeuroPace, Inc. Todos los derechos reservados. | DN 1056000 Rev. 1 | Fecha de revisión: 2026-10 |
Referencia rápida del monitor remoto modelo 5106

ENCENDER EL MONITOR REMOTO

Es posible que la tableta que reciba no sea el mismo modelo que se muestra aquí. La ubicación de los botones y las conexiones también puede ser diferente.

Pulse el interruptor de encendido situado en la parte superior o lateral, cerca de la esquina superior.


Cuando se enciende, aparece la pantalla de inicio.



CONECTARSE A WI-FI

Para comunicarse con la base de datos de NeuroPace (sistema de gestión de datos del paciente [PDMS, por sus siglas en inglés]), conecte el monitor remoto a Wi-Fi.


1. Toque el botón de **Wi-Fi** en la parte inferior izquierda para ver y seleccionar las redes inalámbricas disponibles. Seleccione la red deseada y toque **Connect**. Si la red requiere una contraseña, aparecerá un cuadro de diálogo para que la introduzca (consulte el paso siguiente). Si no, se conectará de inmediato.

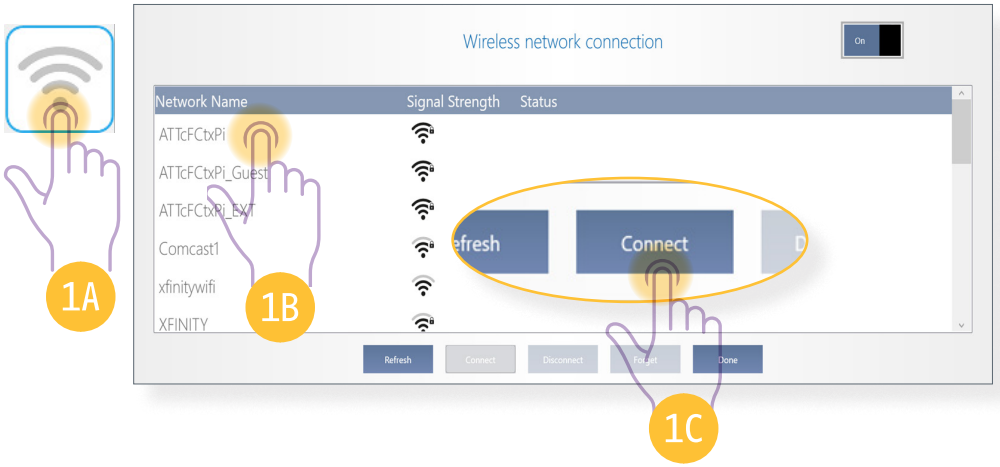

2. De ser necesario, toque dentro del campo de la contraseña y utilice el teclado en pantalla para introducir la contraseña de Wi-Fi solicitada.




3. Toque **Done** para volver a la pantalla de inicio.

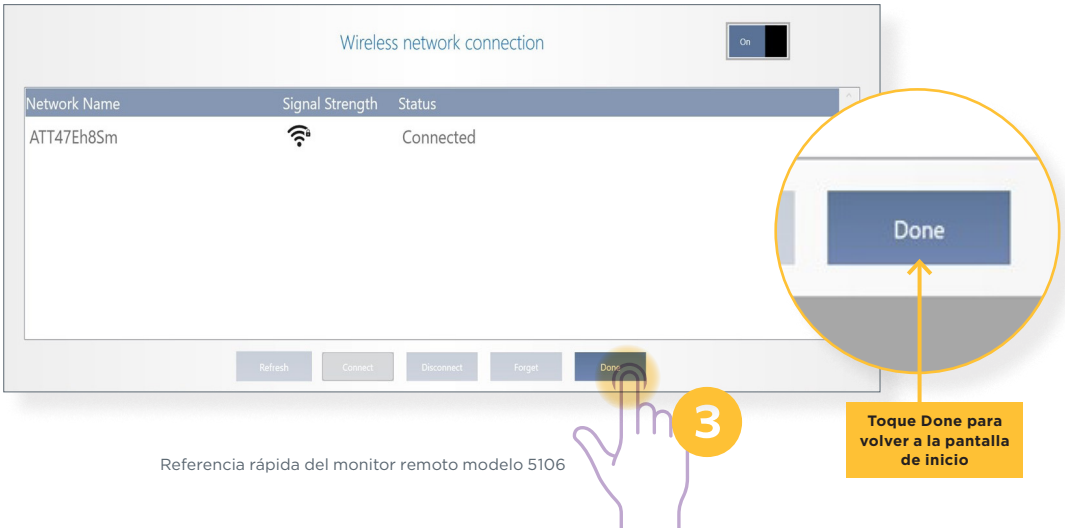



OBTENER DATOS DE SU NEUROESTIMULADOR




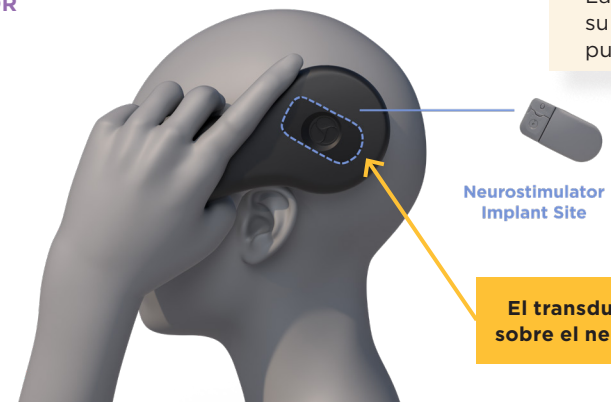


Sostenga el transductor sobre el neuroestimulador y toque **Get Data from your Neurostimulator**. En la pantalla, se indicará "Communicating with neurostimulator" y luego "Getting data from the neurostimulator". En la pantalla, se mostrará el nivel y la calidad de la señal.

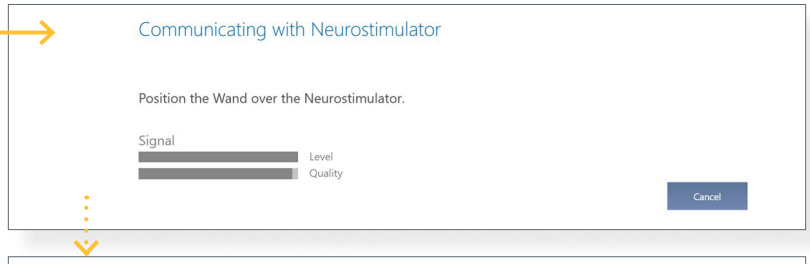

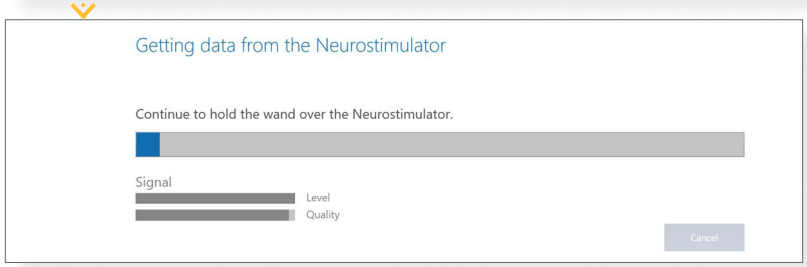


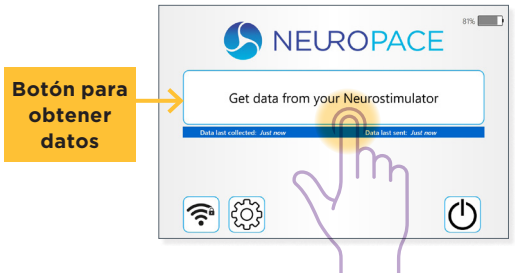

Si aleja demasiado el transductor del neuroestimulador mientras se recolectan los datos, puede aparecer el siguiente mensaje: "Unable to communicate with the neuro-stimulator. Reposition the wand over the neurostimulator". Acerque el transductor al neuroestimulador hasta que desaparezca ese mensaje.

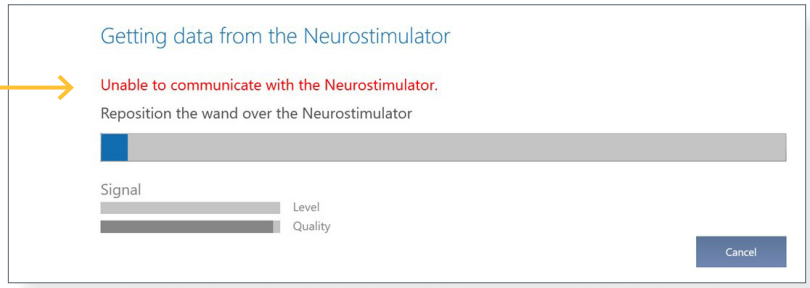


En la pantalla del monitor remoto, se informará cuando se hayan recolectado los datos correctamente. Puede dejar el transductor. A continuación, si está conectado a Wi-Fi, el monitor remoto comenzará automáticamente a cargar los datos en la base de datos del PDMS de NeuroPace y le informará cuando la carga se haya completado. Si el monitor remoto no está conectado a Wi-Fi, los datos se cargarán automáticamente la próxima vez que se conecte. No se perderá nada. Pulse **Continue** para volver a la pantalla de inicio.

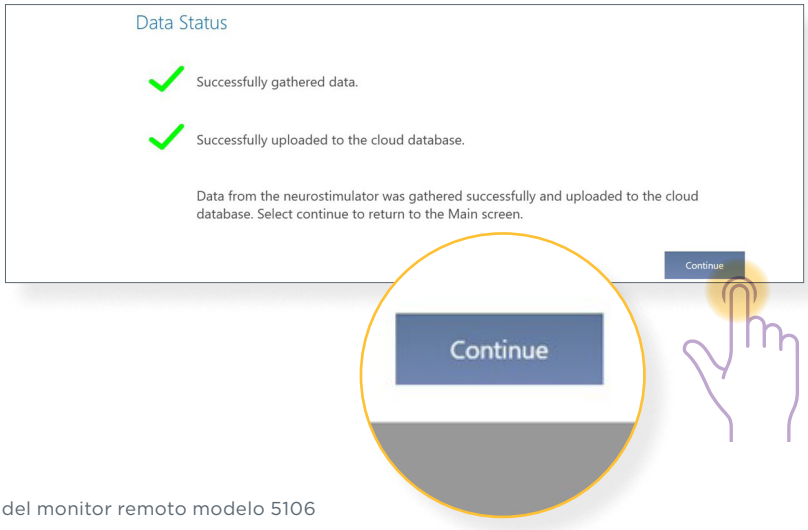

APAGAR EL MONITOR REMOTO

Cuando termine de utilizar el monitor remoto, asegúrese de apagarlo. Esto ayudará a conservar la batería de la tableta y la electricidad cuando no esté en uso.

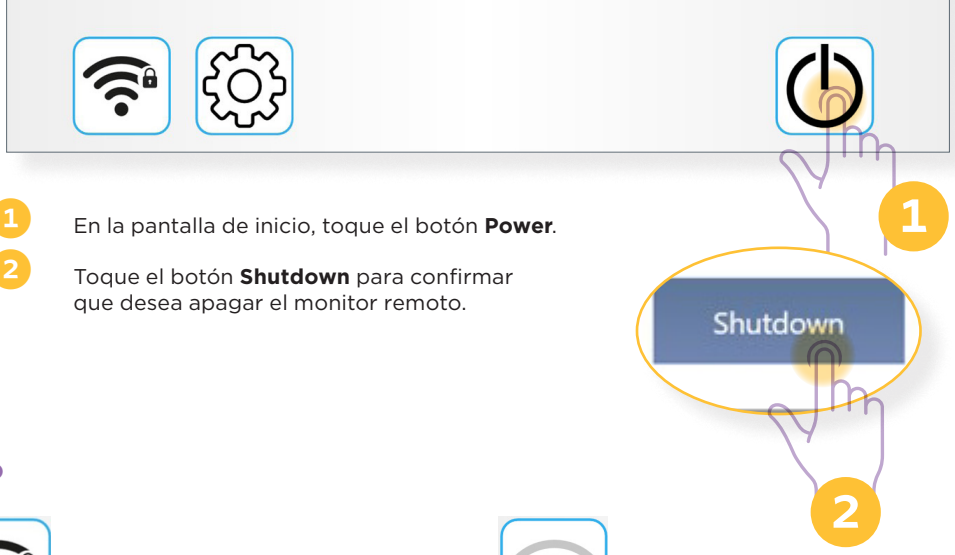

1. En la pantalla de inicio, toque el botón **Power**.
2. Toque el botón **Shutdown** para confirmar que desea apagar el monitor remoto.

BOTÓN DE WI-FI EN LA PANTALLA DE INICIO



Si todas las barras están grises, significa que la tableta no está conectada a Wi-Fi, pero el Wi-Fi está activado. Así es como se ve al configurar la tableta por primera vez, hasta que se conecta a una red Wi-Fi. Toque el botón para ver las redes Wi-Fi disponibles yconectarse.



Si las barras están negras, significa que el Wi-Fi está conectado a una red inalámbrica. El símbolo del candado (como se muestra) indica que la red requiere una contraseña. La tableta recuerda las contraseñas y se conecta automáticamente a las redes a las que se haya conectado antes. Cuantas más barras negras hay, mayor es la intensidad dela señal de Wi-Fi.



Cuando aparece "OFF" con las barras grises, significa que el Wi-Fi está desactivado. La conexión Wi-Fi está activada por defecto y no debe desactivarse. Si está desactivada, toque para acceder al botón Wi-Fi On/Off y active el Wi-Fi.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte a continuación los pasos que debe seguir ante los problemas más frecuentes. Si estas acciones no solucionan el problema, consulte la sección "Solución de problemas" del Manual del monitor remoto.

Problema	Qué hacer
El monitor remoto no se enciende al pulsar el interruptor de encendido.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien enchufado al tomacorriente y al puerto correcto del monitor remoto. Si está utilizando la batería del monitor remoto como fuente de alimentación, asegúrese de que esté completamente cargada.
La intensidad de la señal del transductor es muy baja o nula, o la señal es inconstante.	• Asegúrese de que el transductor esté correctamente conectado al monitor remoto y de que haya colocado el lado ahuecado del transductor directamente sobre el neuroestimulador. • Acerque el transductor al neuroestimulador para ver si mejora la calidad de la señal. • Pruebe desenchufar el monitor remoto del tomacorriente. Asegúrese de que la batería esté cargada antes de hacerlo. • Pruebe moviendo el monitor remoto a otra ubicación.
El Wi-Fi está conectado, pero el monitor remoto no puede cargar datos en el PDMS.	• Esto puede ocurrir cuando la red Wi-Fi requiere que introduzca información en un navegador web para conectarse a Internet, como ocurre en algunos hoteles y otros negocios. Dado que el monitor remoto no cuenta con un navegador web, deberá seleccionar otra red Wi-Fi para cargar sus datos en el PDMS.